

CERAGEM 

取扱説明書

CGM EP-1101



CERAGEM 

GMP
Good Manufacturing Practice

総発売元

株式会社ジーエムピージャパン

〒379-2146 群馬県前橋市公田町590番地

TEL : 027-219-6612

FAX : 027-219-8002

ホームページ

<http://www.gmp-japan.com>

M22A123002



Disposal of Old Electrical
& Electronic Equipment
Applicable in the European
Union and other European
countries with separate
collection systems.








重要な安全上の事項

安全の為に、ご使用前に取扱説明書をご覧ください、安全な場所に保管をしてください。

以下の情報は、使用者の安全を守り、物的損害を防ぐためのものです。

必ず本取扱説明書をご覧ください、製品を適切に使用してください。

重要な安全上の事項は、以下の通りに分けられています。

 危険	誤った使い方をすると、人が死亡または重症を負う危険性が高いことを示します。
 警告	誤った使い方をすると、人が死亡または重症を負う危険性があります。
 注意	誤った使い方をすると、軽傷または物的損傷のみを負う危険性があります。

危険 感電の危険性を低減するために、必ず以下のことをお守りください。

- 本製品使用中に、ピンなどの金属類を使用しないでください。
- 湿気または水分のある所で使用しないでください。
- 外部導子は必ず外部導子専用カバーを使用してください。
直接肌に触れますと火傷の恐れがあります。
- 外部導子は目の周り（眼球）では使用しないでください。
- 感電又は火傷を避ける為に、手を乾かし電源プラグを抜く時はコードを引っ張らないでください。
- 落雷または地震が発生した場合は、本製品の使用をやめ、電源を抜いてください。
(感電または火災の恐れがあります。)

警告

- 弊社提供の外部導子カバー以外の、火災の原因となる可能性のある他の繊維質または毛布の様な製品の上に置かないでください。(加熱により火災および感電が生じる場合があります。)
本製品は取扱説明書に従って使用してください。
- 弊社が提供したパーツ以外のものを使用しないでください。
- お子様 が本製品を使用する時は、大人の監督下でおこなってください。お子様の手の届かないところに保管をしてください。
- 妊娠、悪性腫瘍、高熱、骨粗鬆症、アレルギー、過敏症を患っている方、またペースメーカー、除細動器を使用している場合は、使用する前に担当の医師に相談してください。
- 空気中に異物がある場所または酸素を取り扱う場所出製品を使用しないでください。



重要な安全上の事項

- お客様相談室にお問い合わせいただき、検査またはアフターサービスをご依頼ください。
 - 本製品が落下または破損した時
 - 本製品内に液体が入った時
 - コードまたは電源ボタンが破損した時
 - 本製品に不具合が生じた時

電気暖房器具またはヒーターに電源コードを近づけないでください。

- 分解したり改造したり、修理をしたりしないでください。
修理が必要な時は、お客様相談室または購入された販売店へお問い合わせください。
- 火傷の危険を避けるために、
身体の1か所に5分以上、外部導子を使用しないでください。
- 怪我や損傷を避ける為に、製品の上を歩いたり立ったりしないでください。
- 温熱マットを含む暖房器具の上で本製品を使用しないでください。

⚠ 注意

- ご使用にならない時は電源プラグを抜いてください。
- 高い設定温度は火傷の危険性を増大させます、特に敏感肌をお持ちの方又はお子様はご注意ください。
- 火傷の危険性を軽減する為に、皮膚が弱く、敏感肌または温度調整のできない方またはお子様は長時間使用する際は注意する必要があります。
- もし、本製品を使用中に異常な兆候が見られた場合は、直ちに使用を止め主治医に相談してください。
- 電源コードまたは外側の配線を無理に曲げないでください。感電および火災の恐れがあります。
- 可燃物（蠟燭、タバコ、アルコール）及び液体類から離してください。
重いものまたは尖ったものを本製品の上に置かないでください。
- 本器は一日に4回以上のご使用をお勧めしていません。
- 本製品に力を加えないでください。
- ご使用前にコンセントの確認をしてください。(本製品を損傷及び火災の危険があります。)
- 外部導子をご使用中、ケーブルを引っ張らないでください。(ケーブル損傷の原因となります。)
- 外部導子へ過度の力を加えないでください。(損傷の原因となります。)
- お子様のご使用の時は、必ず大人の方の監視のもとにご使用ください。
- 本製品は表面が熱くなります。
怪我及び火傷をしない為に、熱に鈍感な方は本製品を使用しないでください。
- ケース収納の際は、ご注意ください。指や身体に怪我をする恐れがあります。

目次

>> 安全に関する重要事項	02
- 危険	
- 警告	
- 注意	
1. 製品の紹介	05
- 製品の特徴	
- 付属品	
- 各部の名称	
2. 接続と製品使用方法	10
- 取り付け方法	
- 製品使用方法	
- 手動モード	
- 自動モード	
- エラー表示	
3. メンテナンスとアフターサービス	16
- 自己点検チェックリスト	
- 製品のメンテナンスと仕様	
- 製品保証書	

障害者または幼児が使用する場合は、保護者が立ち会う必要があります。

I. 製品の紹介


1. 製品の特徴
2. 付属品
3. 各部の名称

1. 製品の特長

- 持ち運びができ便利で画期的なデザイン
- 使いやすい接続機器
- ワンタッチ方式の医療用コネクタを使用
- 高/低 プロジェクト・システムによる指圧力制御
- 温度は1℃ 単位で管理
- 先進的なバイオテクノロジー 熱源システム
- 省エネで、寿命の長い LED を使用
- 体の鍼灸ツボをピンポイントで指圧位置表示するプロジェクト・システム

2. 付属品


■ 9球外部導子

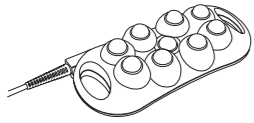

■ 3球外部導子



■ 腹部ベルト

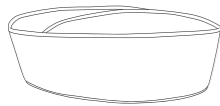

■ 坊塵カバー




■ 高さ調整板



■ 本体

■ 外部導子カバー

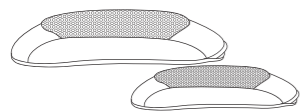


■ 電源コード



■ 使用ガイド
■ 取扱説明書
■ 簡単取説



3. 各部の名称

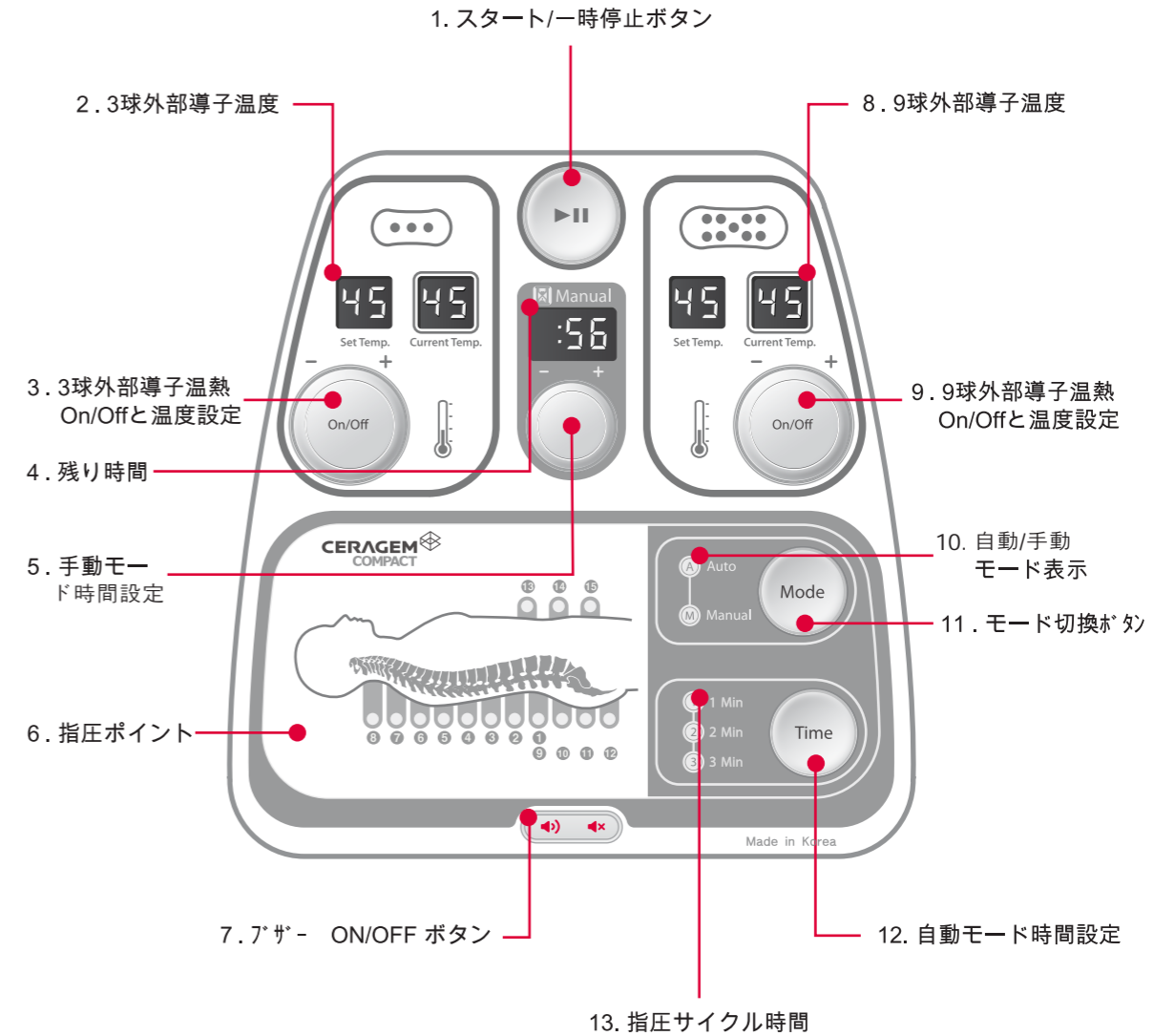



3. 各部の説明

1	スタート/一時停止ボタン	運転をスタート/一時停止をするボタン
2	3球外部導子温度	3球外部導子の現在の温度と温度設定を確認します。
3	3球外部導子On/Offと温度設定	3球外部導子のON/OFFの切換えと温度を30から60℃まで設定ができるボタン
4	残り時間	手動モード及び自動モードの残り時間を表示します
5	手動モード時間設定	手動モードの時間を5分から30分まで設定できるダイヤル
6	指圧ポイント	自動モード中の指圧ポイントを表示します。
7	警報 (ブザー) ON/OFF ボタン	警報 (ブザー) をONまたはOFFに設定できるボタン
8	9球外部導子温度	9球外部導子の現在の温度と設定温度を表示します。
9	9球外部導子温熱On/Offと温度調整	球外部導子のON/OFFの切換えと温度を30から60℃まで設定ができるボタン
10	自動/手動モード表示	現在のモードを表示します
11	モード切換えボタン	自動または手動モードを選択できるボタン
12	自動モード時間設定	自動モードで運転をする時、指圧サイクル時間を1、2又は3分に設定出来るボタン
13	指圧サイクル時間	自動モードにおける指圧時間

II. 設置と使用方法

1. 設置
2. 本製品の使用方法
3. 手動モード
4. 自動モード
5. エラー表示


1. 設置




注意

- 本製品を平らな場所に設置してください。
- 湿気のある場所またはホコリのある場所での設置は避けてください。

1 収納棚を開き 9 球外部導子, 3 球外部導子とケーブルを取り出してください。

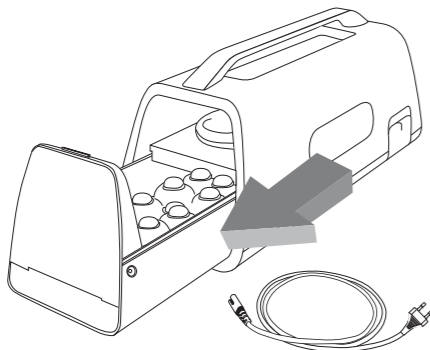

2 外部導子ケーブルは本体にあるそれぞれの外部端子へ接続してください。

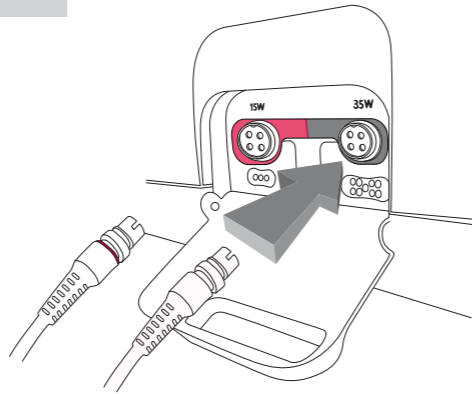


9 球及び 9 球外部導子は必ずご使用前に接続をしてください。





警告

コネクタのピンには触れないでください。怪我や故障の原因になります。

3 本体の右側に電源プラグを接続してください。

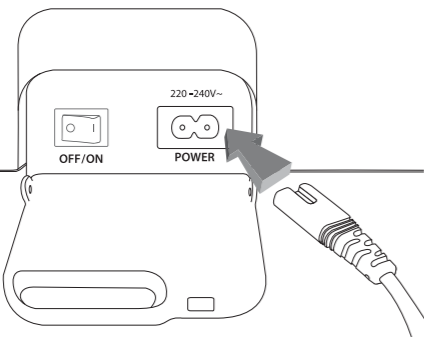

4 プラグをコンセントへ接続してください。

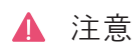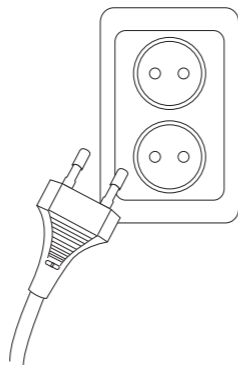


注意

電源スイッチがONの時に電源コードを接続すると、故障の原因となることがあります。

2. 本製品の使用方法


1

本体の右側にあります電源スイッチをONにすると電源が入ります。

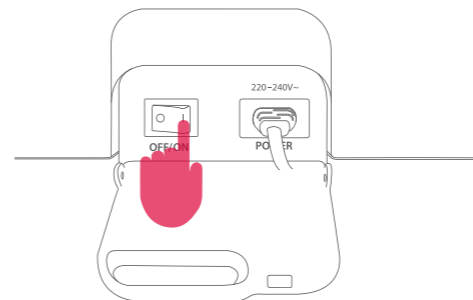

2

プログラムが起動します

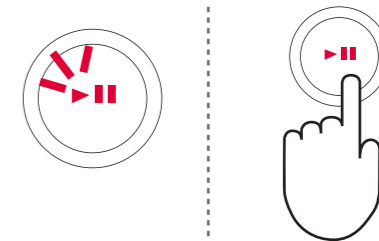


3

ブザーON/OFFボタンにより、ブザー音有/無を設定します。
(自動モードと手動モード両方に適用)



4




温度設定ダイヤルを回して、外部導子の温度を30°C~60°Cに設定してください。
(自動モードと手動モード両方に適用)
外部導子を温度設定ボタンON/OFFを使用し、温度を調整します。

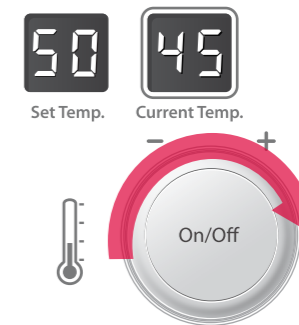




5

- 一時停止
1. 使用中いつでもスタート/一時停止ボタンを押し、一時停止ができます。
 2. 一時停止モードの時は、時間表示が点滅します。
 3. その他のボタンは一時停止中機能はしません。
 4. 再開するには一時停止ボタンを押してください。
- 本製品は 10 分間一時停止モードが続くと自動的に電源が切れます。

3. 手動モード

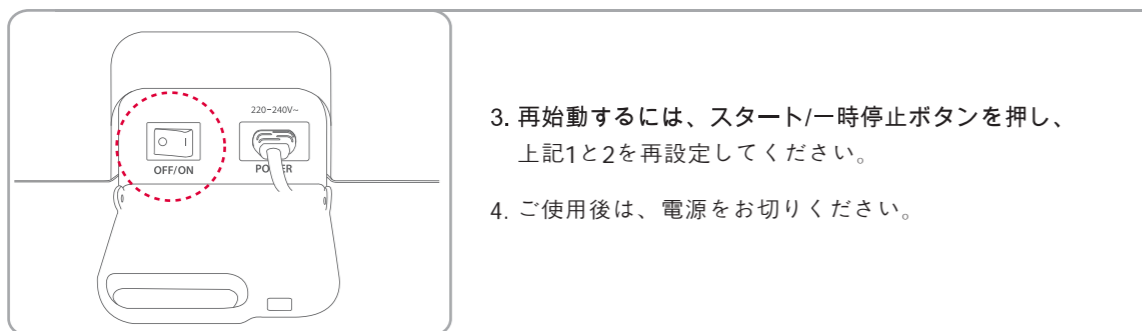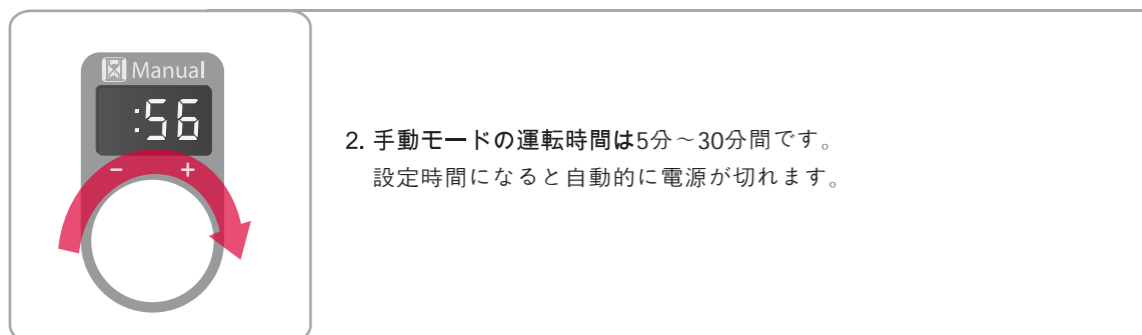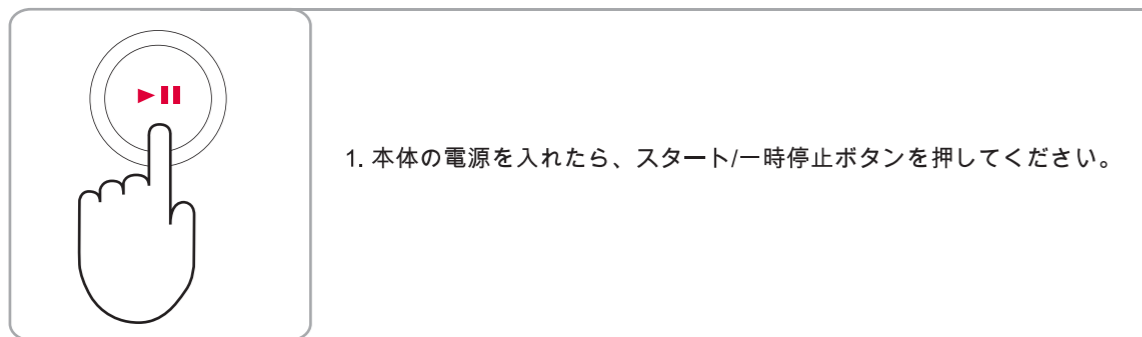

4. 自動モード

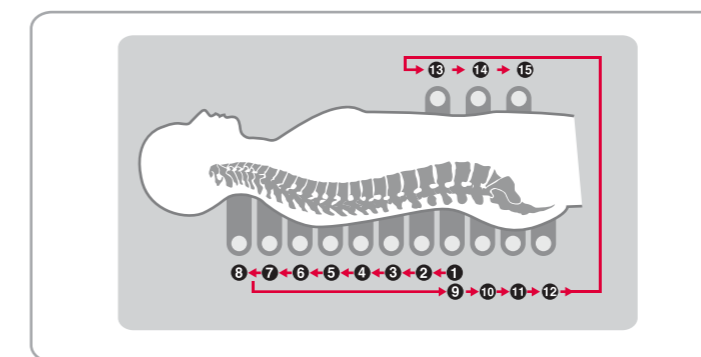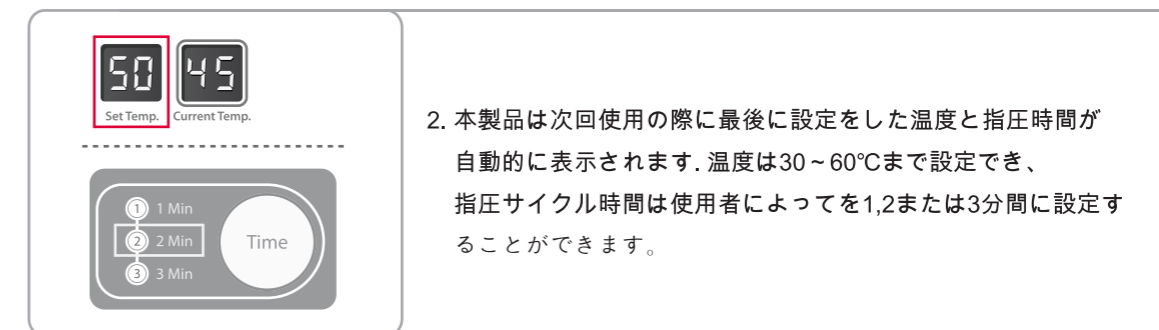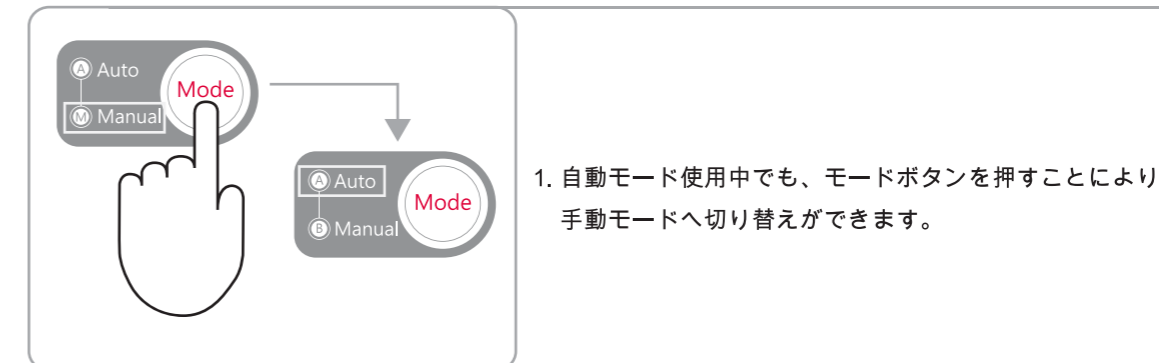



5. エラー表示

エラーコード	エラーの説明
tH	 <ul style="list-style-type: none"> ■ 本体の温度が最大設定温度 (60°C) を10°C以上超えた場合、警報音が毎秒2回5秒間鳴り、自動的に電源が切れます。 ■ 最寄りの販売店へ連絡を取り、点検または修理を受けてください。
-9	 <ul style="list-style-type: none"> ■ 本製品の温度が-10°Cを下回っていると ■ 外部導子が温まり適切に動き始めます。
SE	 <ul style="list-style-type: none"> ■ 内部センサー異常。警報音が毎秒2回5秒間鳴り、自動的に電源が切れます。 ■ 最寄りの販売店へ連絡を取り、点検または修理を受けてください。
PH	 <ul style="list-style-type: none"> ■ 本体温度が80°C以上になりますと、警報音が毎秒2回5秒間鳴り、自動的に電源が切れます。 ■ 最寄りの販売店へ連絡を取り、点検または修理を受けてください。
CH	 <ul style="list-style-type: none"> ■ 電流値が許容範囲を超えますと、警報音が毎秒2回5秒間鳴り、自動的に電源が切れます。 ■ 最寄りの販売店へ連絡を取り、点検または修理を受けてください。

III. 設置と使用方法

1. 点検チェックリスト
2. 製品のメンテナンスと仕様
3. 製品保証書



1. 点検チェックリスト

ご使用前点検チェックリスト

- 電源コードがコンセントに接続していますか？(本体のスイッチが“ON”になっているか確認をしましたか?)
- 外部導子が本体に接続されていますか？
- “スタート/一時停止”ボタンのLEDは点いていますか？
- 温度が表示されていますか？
- 外部導子は最適な温度である45～55℃に設定されていますか？
- 警報音(ブザー)ON/OFFのLEDは点いていますか？
- 外部導子のLEDは点いていますか？
- 外部導子の翡翠は暖かくなっていますか？
- 外部導子カバーに損傷が無いか確認をしてください。

ご使用後の点検チェックリスト

- 全ての表示が消えていますか？
- 外部導子のLEDが消えていますか？
- 電源ボタンは消えていますか？
- 電源コードはコンセントから抜けていますか？

アフターサービス要請をする前に

Q1: 本体が正確に動かない？

電源がはまらない。 _____ 電源コードが接続されているか確認をしてください。
電源ボタンが“ON”になっているか確認をしてください。
電源を他のコンセントに接続を試してみてください。

使用中に電源が落ちる。 _____ 電源コードを最初から接続し直してください。
ボタンが動かない。 _____ 電源コードを最初から接続し直してください。
外部導子を最初から接続し直してください。

警報音(ブザー)が鳴らない。 _____ 警報音(ブザー)ボタンを試しに押ししてみてください。

Q2: 外部導子が機能しない？

外部導子は正確に接続されていますか？ _____ 外部導子を最初から接続し直してください。
_____ 電源コードを最初から接続し直してください。



2. 製品のメンテナンスと仕様

製品メンテナンス

- 直射日光及び湿気を避けてください。(変色および損傷の原因になる可能性があります)
- 室温で保管をしてください。
- 製品は可燃物と接触すると、深刻な損傷や怪我が発生する可能性があります。

製品仕様

型番	CGM EP-1101
一般的名称	家庭用温熱式指圧代用器
電圧	AC100V, 50/60Hz
ヒューズ	250V, 1.6A
消費電力	最大48W
導子温度	30℃ - 60℃
ケーブル寸法	電源コード寸法 : 1,830mm 外部導子ケーブル寸法 : 2,700mm
本体寸法	本体 : 551mmx216mmx249mm(±10mm) 9球外部導子 : 302mmx132mmx65mm(±10mm) 3球外部導子 : 230mmx101mmx65mm(±10mm)
重量	本体 : 3.8Kg(±0.1Kg) 9球外部導子 : 0.85Kg(±0.1Kg) 3球外部導子 : 0.55Kg(±0.1Kg)
製造販売業者	SHENPIX-INTERNATIONAL CO.,LTD. シェンピクス・インターナショナル株式会社



3. 製品保証書

MEMO

保証書

- ▶消費者保護法により本製品を保証致します。
- ▶本保証書は再発行いたしません。
- ▶何か問題点がございましたら販売店またはお客様相談室へご連絡をください。
- ▶本製品の補修部品の保有期間は、本製品の製造中止日より3年間です。(重要部品は5年間)

一般的名称	家庭用温熱式指圧代用器	型番	CGM EP-1101
保証期間	購入後1年間	製造番号	
購入日	20 , ,	販売店名	

保証内容

本製品の購入から1年以内に通常使用による故障に限り、無償でサービスを受けることができます。

有償サービス

- お客様の不注意による故障は有償にてサービスを受けることができます。
- 原因が自然災害の場合には、修理実費を申し受けます。
- 消耗品は定価にて申し受けます。

総販売元：株式会社ジーエムピージャパン

〒379-2146 群馬県前橋市公田町590番地 | TEL:027-219-6612 | FAX:027-219-8002

お客様相談室  0120-19-7777

受付時間：午前10時～午後4時(月～金) 年末年始・祝祭日は休ませていただきます。

MEMO

A series of horizontal dashed lines for writing, spanning the width of the page.